

CAMA HOSPITALAR



MT 212

Registro ANVISA 80581990009



Diamond
intensive **CARE**

DESTAQUES

DIAMOND

INTENSIVE CARE

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. POSSUEM VARIÁÇÕES, COM OPCIONAIS.

Para-choque

Controle duplo nas grades

Iluminação noturna

Rodízio 6"

Pedais de freio total e direcional

Raio X no dorso

OPCIONAL

MESA DE REFEIÇÃO

Grades Diamond rota de fuga


Leito em termoplástico

Extensor de leito

Supervisor display na peseira



Conta com grades exclusivas, que oferecem movimentação suave, travamento fácil e **não ocupam espaço** adicional na área de circulação durante o movimento.

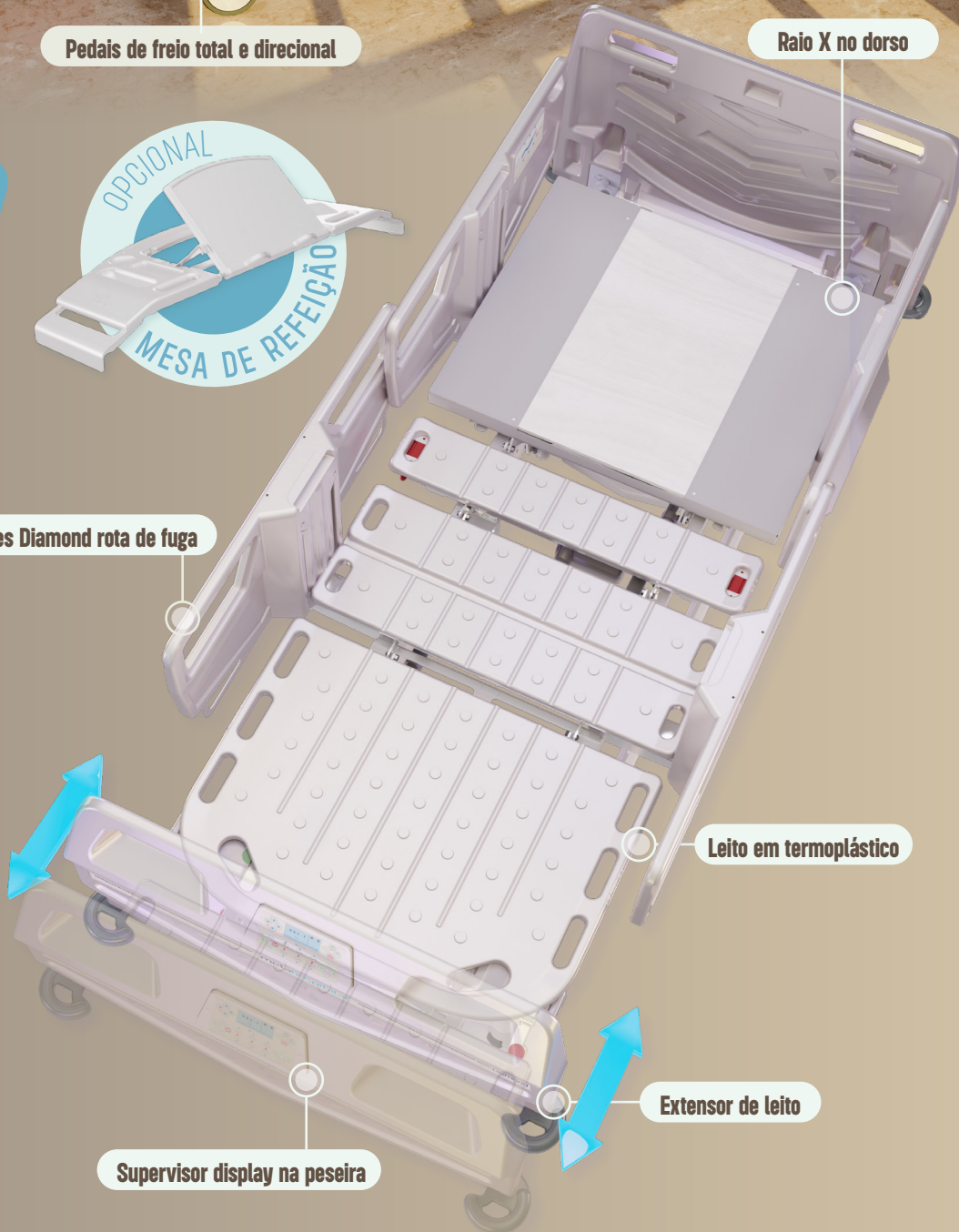


SUPERVISOR DIGITAL



COMPENSAÇÃO ABDOMINAL

Reduz a pressão sobre o abdômen durante a elevação do dorso, evitando o deslizamento do paciente e minimizando o risco de lesões por pressão.

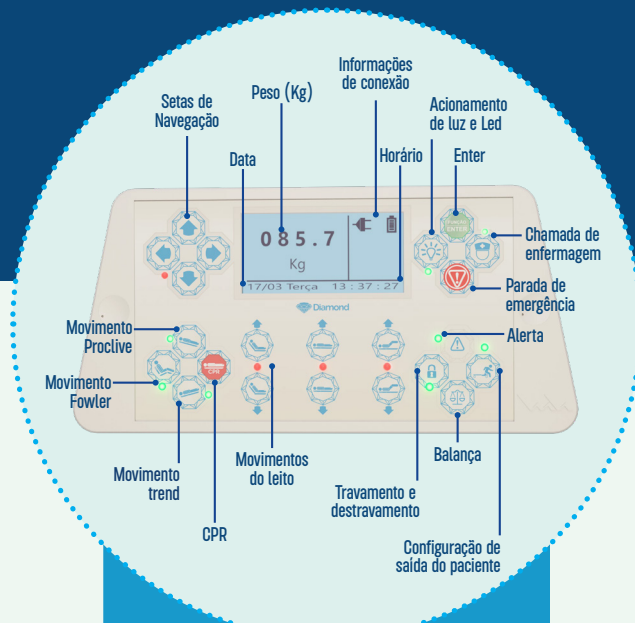

O Supervisor com balança integrada da cama MT 212 Diamond Intensive Care permite monitorar o peso do paciente diretamente no leito

1500H DE RESISTÊNCIA



A altura mínima de 33 cm aproxima o leito do piso, facilitando a entrada e saída do paciente, reduz o risco de quedas e dispensa o uso de escadas.

CARGA MÁXIMA

280KG



ALTURA MÍNIMA



33cm

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. POSSUEM VARIAÇÕES. COM OPCIONAIS.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAMA HOSPITALAR DIAMOND INTENSIVE CARE MT 212

CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA

Estrutura:

Estrutura tubular com chapas de diferentes espessuras de aço carbono, projetada para atender aos esforços e carga nominal do produto. Chassi consiste numa estrutura de tubos 50 x 30 x 2,0 mm com chapas de 1/4" de espessura. O estrado é composto por estrutura de tubos 50 x 30 x 2,0 mm com chapas de 3/8". A estrutura metálica dos leitos consiste em quatro seções articuladas feitas com uma estrutura de tubos 30 x 20 x 1,2 mm com chapas de 3/16".

Leito:

Leito termoplástico estruturado, com contenção de paciente e limitador para colchão. Fixação feita de forma independente nas quatro seções articuladas da estrutura metálica do leito.

Movimentação:

Movimentação vertical realizada por um sistema mecânico em aço carbono que transforma o movimento linear horizontal dos motores no movimento vertical da cama, proporcionando, desta forma, a elevação de altura. Movimentos da cama realizados utilizando quatro motores e um sistema ajustável com seis posições.

Movimentos:



Comandos Eletrônicos:

Comando Horizontal na grade, Supervisor com display na peseira.

Rodízios e Sistema de Freio:

Possuem 6" de diâmetro em termoplástico, desempenhando proteção ao piso com baixo ruído no deslocamento e excelente capacidade de carga. Sistema de frenagem com freio total e direcional.

Grades Laterais e Sistema de Grade:

Conjunto de quatro grades laterais em polietileno injetado de alto impacto, do modelo new premium enclausurada. Sistema compacto com trava.

Cabeceira, peseira e encaixe de cabeceira:

Cabeceira e peseira em plástico polietileno injetado de alto impacto, do modelo new premium. Encaixe com trava e removível.

Acabamento Superficial da Estrutura Metálica:

Toda estrutura de aço carbono recebe tratamento químico antiferrugem e acabamento com pintura eletrostática a pó, sendo levado a uma temperatura de 220 °C em estufa, desta maneira aumenta-se a resistência química da estrutura. **Com teste salt spray de 1500h.**

Acabamento para Chassi: Revestimento completo para chassi em termoplástico.



ACESSÓRIOS: PADRÃO

Suportes para bolsa de líquidos (dreno)
Suportes de Contenção
Indicador de Ângulo Analógico Dorso e Trendelenburg
Sistema de compensação abdominal
Cabo de alimentação
Acabamento decorativo personalizado para grades, cabeceira e peseira
Parada de emergência
01 Suporte de soro com regulagem de altura
Extensor de Leito
Luz noturna
Iluminação indireta nos comandos de grade
Sistema de Freio Total e Direcional
Dorso Radio Transparente com Gaveta de Raio X
Protetor de Parede Bumper
Acabamento decorativo padrão para grades, cabeceira e peseira
Balança
Bateria de Emergência
Movimentação motorizada
Peseira e Cabeceira removível sistema exclusivo (Encaixe Fácil)
Suporte para Soro com regulagem de altura
Estrutura metálica com pintura eletrostática
Proteção contra respingo de líquidos IPX4

ACESSÓRIOS: OPCIONAIS

- ☐ Suporte para monitor
- ☐ Régua tripla
- ☐ Iluminação indireta embutida nas grades
- ☐ Chamada de enfermagem
- ☐ Alarme visual e sonoro de aviso de saída total do paciente
- ☐ Alarme visual e sonoro de aviso de saída parcial do paciente
- ☐ Alarme de risco de queda do paciente em 5 níveis que indica intenção do paciente de sair do leito
- ☐ Alarme visual de freio acionado e/ou destravado
- ☐ Mesa de Refeição Acoplada
- ☐ Escadinha acoplada
- ☐ Leito Radio Transparente com Gaveta de Raio X
- ☐ Inclinômetro Digital
- ☐ Colchão
- ☐ 5ª roda
- ☐ Suporte para cilindro de oxigênio
- ☐ Sensor de altura
- ☐ Wi-Fi
- ☐ Bluetooth
- ☐ Caixa de som
- ☐ Sistema de chamada
- ☐ Entrada USB
- ☐ Régua para Gás
- ☐ Quadro Balcânico
- ☐ Cesto porta objetos
- ☐ Tábua para massagem cardíaca

LISTA DE OPCIONAIS
CAMA HOSPITALAR DIAMOND CARE
MT 212

ESTRUTURA:

- ☐ Estrutura semelhante com mesmas características em aço inox;
- ☐ Estrutura semelhante com mesmas características em alumínio;
- ☐ Estrado construído em perfil 'U' em aço carbono com 3,2mm de espessura, tanto em aço carbono, aço inox ou alumínio.

LEITO:

- ☐ Leito termoplástico estruturado removível;
- ☐ Leito em chapa de madeira (MDP, MDF ou TS);
- ☐ Leito removível em chapa de aço inox perfurado ou liso;
- ☐ Leito removível em aço carbono com perfurado ou liso;
- ☐ Leito removível em chapa de alumínio, perfuradas ou lisas;
- ☐ Leito removível em ABS.

SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO:

- ☐ Sistema mecânico semelhante com mesmas características em aço inox;
- ☐ Sistema mecânico semelhante com mesmas características em alumínio;
- ☐ Manivela retrátil.

MOTORIZAÇÃO:

- ☐ Dois motores;
- ☐ Três motores;
- ☐ Cinco motores.

MOVIMENTAÇÃO:

- ☐ GPR + descida do leito para posição mínima ONE TOUCH;
- ☐ Poltrona cardíaca;
- ☐ Poltrona ONE TOUCH.

COMANDOS ELETRÔNICOS:

- ☐ Controle de mão móvel sem bloqueador;
- ☐ Comando Vertical na grade;
- ☐ Comando Horizontal na grade;
- ☐ Supervisor com display na grade;
- ☐ Supervisor sem display na grade;
- ☐ Supervisor com display na peseira;
- ☐ Supervisor sem display na peseira;
- ☐ Supervisor de comando na estrutura do leito;
- ☐ Supervisor satélite móvel com fio;
- ☐ Supervisor satélite móvel com bloqueador.

RODÍZIOS:

- ☐ Roda de 3" de diâmetro em termoplástico ou zincado com ou sem freios;
- ☐ Roda de 4" de diâmetro em termoplástico ou zincado com ou sem freios;
- ☐ Roda de 5" de diâmetro em termoplástico ou zincado com ou sem freios;
- ☐ Roda de 6" de diâmetro ou zincado com ou sem freios;
- ☐ Roda de 8" de diâmetro em termoplástico ou zincado com ou sem freios;
- ☐ Roda de 10" de diâmetro em termoplástico ou zincado com ou sem freios;
- ☐ Roda de 4" de diâmetro em termoplástico com freio total e direcional;
- ☐ Roda de 5" de diâmetro em termoplástico com freio total e direcional;
- ☐ Roda de 8" de diâmetro em termoplástico com freio total e direcional.

SISTEMA DE FREIO:

- ☐ Sistema de frenagem individual em duas rodas em diagonal;
- ☐ Sistema de frenagem individual nas duas rodas da peseira;
- ☐ Sistema de frenagem individual nas duas rodas da cabeceira;

- ☐ Sistema de frenagem com freio total e direcional.

GRADES LATERAIS:

- ☐ Seis grades em polietileno, do modelo flexível enclausurada;
- ☐ Quatro grades em polietileno, do modelo flexível com rota de fuga;
- ☐ Quatro grades em polietileno, do modelo new premium enclausurada;
- ☐ Quatro grades em polietileno, do modelo new premium com rota de fuga;
- ☐ Duas grades de tubo metálico (aço carbono, inox ou alumínio) 3/4" x 1.2mm ou de madeira (MDF, MDP ou TS) com rota de fuga;
- ☐ Quatro grades de tubo metálico (aço carbono, inox ou alumínio) 3/4" x 1.2mm ou de madeira (MDF, MDP ou TS) enclausurada;
- ☐ Duas grades de tubo metálico (aço carbono, inox ou alumínio) 3/4" x 1.2mm ou de madeira (MDF, MDP ou TS) enclausurada;

SISTEMA DE GRADE:

- ☐ Sistema compacto com trava;
- ☐ Sistema universal de subir e descer com trava;
- ☐ Sistema de empilhamento.

CABECEIRA E PESEIRA:

- ☐ Em plástico polietileno injetado de alto impacto, do modelo flexível;
- ☐ Em plástico polietileno injetado de alto impacto, do modelo new premium;
- ☐ Em tubo metálico (aço carbono, inox ou alumínio) 3/4" x 1.2mm;
- ☐ Em madeira (MDF, MDP ou TS).

ENCAIXE DE CABECEIRA:

- ☐ Encaixe sem trava removível;
- ☐ Encaixe fixo.

ACABAMENTO PARA CHASSI:

- ☐ Sem revestimento;
- ☐ Revestimento parcial para chassi em termoplástico somente sobre as rodas;
- ☐ Revestimento parcial ou completo em alumínio;
- ☐ Revestimento parcial ou completo em aço carbono pintado;
- ☐ Revestimento parcial ou completo em aço inox.

DIMENSÕES:

- ☐ **Leito:** Comprimento: 1700~2280mm x Largura: 700~1100mm x Altura: 300~830mm; **Total:** Comprimento: 2000~2400mm x Largura: 1000~1500mm x Altura: 300~830mm.

CARGA MÁXIMA DE TRABALHO / PESO MÁXIMO DO PACIENTE:

- ☐ Carga máxima de trabalho: 180 kg / Peso Máximo do Paciente: 150 kg.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. POSSUEM VARIAÇÕES. COM OPCIONAIS.

DADOS TÉCNICOS:

Leito: Comprimento: 1950~2150mm; Largura: 830mm;
Altura: 330~680mm;



Total: Comprimento: 2280~2480mm; Largura: 1090mm;
Altura: 330~680mm.

Carga máxima de trabalho: 280 kg / Peso Máximo do
Paciente: 250 kg.

O PROJETO FOI DESENVOLVIDO DENTRO DOS PADRÕES DAS NORMAS:

- RDC 665/2022 ANVISA
- NBR IEC 62366
- ISO 14971
- ABNT NBR ISO 9001:2015
- ABNT NBR ISO 13485:2016
- ABNT NBR IEC 60601-1

DIMENSÕES

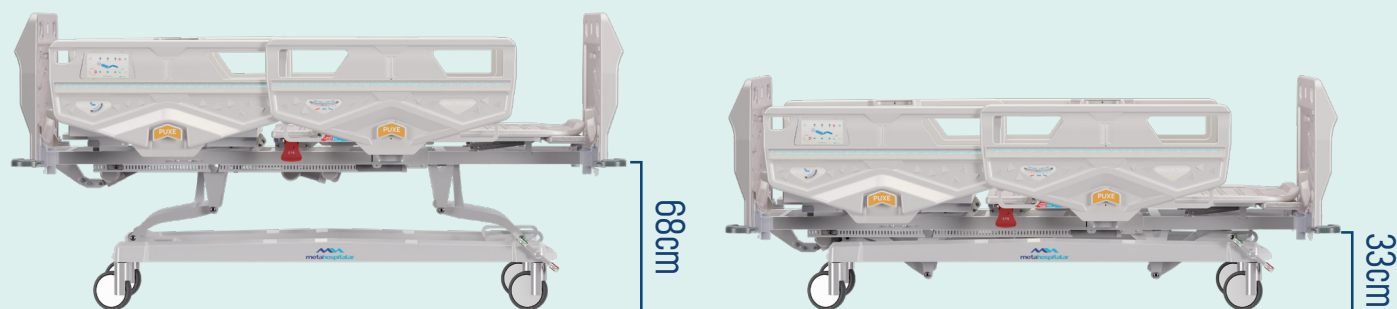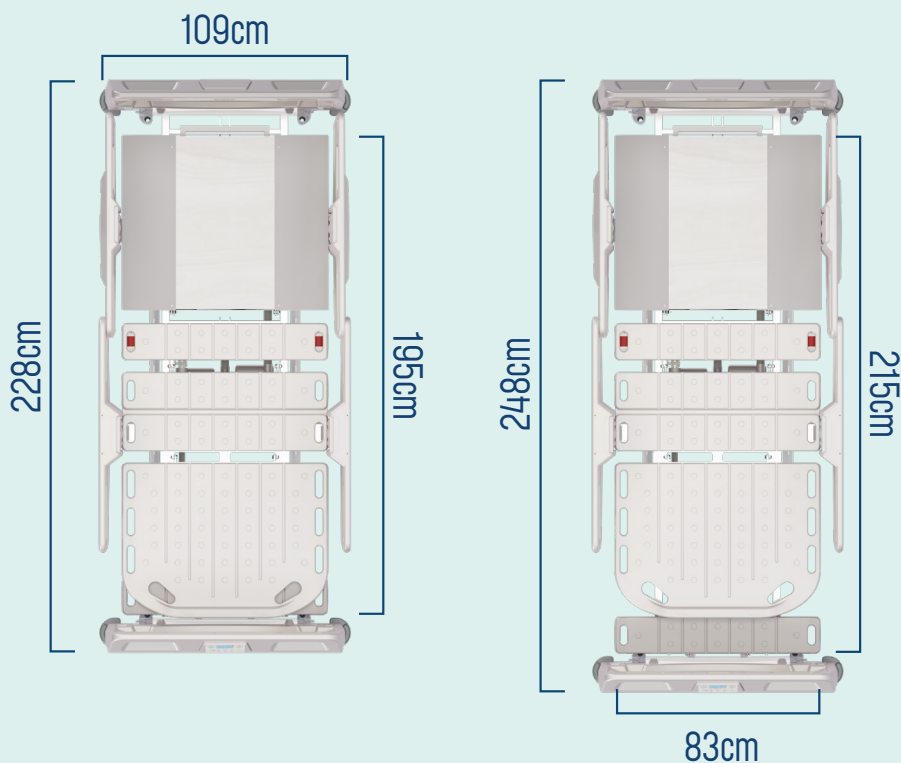

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. POSSUEM VARIAÇÕES. COM OPCIONAIS.

OPCIONAIS DE RODÍZIO COM ALTURA DO LEITO



ESTE DOCUMENTO SE DESTINA SOMENTE PARA USO POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE.

A METAHOSPITALAR CONSIDERA SEMPRE SUJEIÇÕES DE EQUIPES MULTIDISCIPLINARES NOS SEUS PROJETOS, E RECOMENDA QUE OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SEJAM TREINADOS NO USO DE QUALQUER PRODUTO METAHOSPITALAR ESPECÍFICO ANTES DE UTILIZÁ-LO. AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS TÊM COMO OBJETIVO DEMONSTRAR A AMPLITUDE DAS OFERTAS DE PRODUTOS METAHOSPITALAR. UM PROFISSIONAL DE SAÚDE DEVE SEMPRE CONSULTAR A RÓTULAGEM DO PRODUTO E/OU INSTRUÇÕES DE USO ANTES DE USÁ-LO. OS PRODUTOS PODEM NÃO ESTAR DISPONÍVEIS EM TODOS OS MERCADOS, DEVIDO À DISPONIBILIDADE ESTAR SUJEITA ÀS PRÁTICAS MÉDICAS E/OU REGULATÓRIAS EM MERCADOS ESPECÍFICOS. ENTRE EM CONTATO COM UM REPRESENTANTE SE TIVER DÚVIDAS SOBRE A DISPONIBILIDADE DOS PRODUTOS. A METAHOSPITALAR RESERVA-SE O DIREITO DE REALIZAR ALTERAÇÕES, SEM AVISO PRÉVIO, NO DESIGN, NAS ESPECIFICAÇÕES E NOS MODELOS. A ÚNICA GARANTIA CONCEDIDA PELA METAHOSPITALAR É A GARANTIA EXPRESSA POR ESCRITO, VINCULADA À VENDA OU LOCAÇÃO DE SEUS PRODUTOS.